

## Teste Catalyst Cortisol


# Guia de referência rápida

### Requisitos de armazenamento e manuseio

- + Armazenar no congelador (não guardar na porta do congelador).
- + Não é necessário aquecer—execute diretamente do congelador
- + Os testes Catalyst™ Cortisol podem ser deixados em temperatura ambiente por até 8 horas. Após 8 horas, os testes podem retornar ao congelador até 5 vezes, desde que seu pacote não tenha sido aberto.
- + Volume de amostra recomendável:
  - Sangue total: 0,7 ml (700 µL)
  - Soro/plasma: 100 µL (mínimo de 65 µL; 300 µL se analisado com outros slides)

### Basta carregar e executar!

Analizador bioquímico Catalyst One™

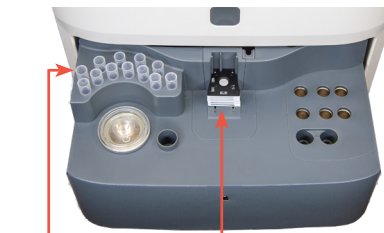

Carregue as ponteiras aqui

Carregue o slide aqui

Analizador bioquímico Catalyst Dx™



Carregue o slide aqui

Carregue as ponteiras aqui

### Perguntas frequentes

Pergunta	Resposta
Como faço a execução do teste Catalyst Cortisol no meu analisador Catalyst?	<p><b>Para o analisador Catalyst One:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ <b>Para o teste de cortisol inicial:</b> Inicie a execução na IDEXX VetLab™ Station. Na tela Selecionar equipamentos, toque em <b>Catalyst One</b> e, em seguida, toque em <b>Cortisol</b>. Selecione o protocolo desejado e suas etapas adicionais, toque em <b>Salvar</b> e, em seguida, toque em <b>Iniciar</b>.</li><li>+ <b>Para testes adicionais/testes de cortisol em várias etapas:</b> Todas as etapas do protocolo selecionadas quando o teste inicial foi processado aparecem na lista Em processo na tela inicial da IDEXX VetLab Station. Quando for a hora de processar a próxima amostra, toque no próximo teste disponível na lista, toque em <b>Na fila</b> e, em seguida, toque em <b>Iniciar sequência</b>.</li></ul> <p><b>Para o analisador Catalyst Dx:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ <b>Para o teste de cortisol inicial:</b> Inicie a execução como faria normalmente na IDEXX VetLab Station. No final da execução, identifique o protocolo e a etapa do protocolo quando solicitado e toque em <b>Enviar</b>. <b>Nota:</b> Se optar por inserir o protocolo/etapa do protocolo mais tarde, toque no paciente na lista Em processo, toque em <b>Adicionar detalhes</b> e, em seguida, selecione as informações do protocolo do paciente.</li><li>+ <b>Para testes adicionais/testes de cortisol em várias etapas:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Localize o resultado de cortisol inicial do paciente na IDEXX VetLab Station <b>OU</b> selecione o paciente aplicável na lista Pendente na tela inicial.</li><li>2. Toque em <b>Adicionar exame</b>, depois em <b>Anexar resultados</b>.</li><li>3. Na tela Selecionar equipamentos, selecione <b>Catalyst Dx</b>.</li><li>4. Quando solicitado no final da execução, selecione as informações do protocolo da execução e toque em <b>Enviar</b>.</li></ol></li></ul>
Eu receberei comentários de interpretação juntamente com os resultados?	Sim! Assim que você selecionar o protocolo correto e todas as etapas forem concluídas, os comentários de interpretação serão fornecidos com o resultado final.
O teste Catalyst Cortisol pode ser executado com outros slides?	Sim! O teste de SDMA pode ser realizado de maneira independente ou com outros slides como parte de um perfil mais completo de paciente. Por exemplo, você pode executar um teste Catalyst™ Lyte 4 CLIP, um Catalyst™ Chem 17 CLIP, um Catalyst™ SDMA e um teste Catalyst™ Cortisol com uma única amostra do paciente.
Ao executar usando outros slides, o teste Catalyst Cortisol pode ser carregado em uma ordem específica?	<ul style="list-style-type: none"><li>+ O slide do Catalyst Cortisol pode ser carregada em qualquer ordem após os eletrólitos.</li><li>+ Ao executar o teste Catalyst Cortisol com slides de eletrólitos, sempre carregue primeiro os slides de eletrólitos.</li><li>+ Para obter resultados em menor tempo, a ordem de carregamento recomendada é Lyte 4 CLIP embaixo, seguido por CLIP bioquímico (ex., Chem 17, Chem 15, etc.), o slide Catalyst Cortisol, quaisquer slides adicionais e o TT4 na parte superior.</li></ul>
Quais espécies foram validadas para o teste Catalyst Cortisol e quais são os resultados numéricos?	Apenas canino <b>Unidades dos EUA:</b> 0,5–30,0 µg/dL <b>S.I./Unidades da França:</b> 14–828 nmol/L
Qual é o tempo de execução do teste Catalyst Cortisol?	Os resultados do teste Catalyst Cortisol ficam prontos em aproximadamente 13 minutos. (O tempo para obter os resultados varia dependendo do tipo de amostra e dos testes adicionais na execução.)
É possível diluir as amostras que estão sendo submetidas ao teste de cortisol?	A IDEXX não aceita o uso de amostras diluídas ao executar o teste Catalyst Cortisol.